

## URONOVIS LONGLIFE® Siliconen Serie

**100% siliconen verblijfskatheter met een synthetische heparine coating.  
In transurethrale en suprapubische uitvoering.**

Het unieke van de Longlife® katheter is de coating van synthetische heparine. De heparine coating is covalent aan zowel de binnen- als de buitenkant gebonden. Door de covalente binding diffundeert de coating niet in het rondom gelegen weefsel, en vormt een uiterst krachtig pantser tegen infecties en verstoppingen. Synthetische heparine gaat namelijk de vorming van een bacteriologische biofilm op en in de katheter tegen, en reduceert zo sterk de kans op infecties en verstoppingen door kristallisatie (incrustatie). Een unieke en wereldwijd gepatenteerde technologie en, klinisch bewezen, 's-werelds beste verblijfskatheter.


De voordelen:

- Sterke reductie van infectierisico
- Een probleemloze levensduur van vele maanden of meer
- Het vermijden van blaasspoelingen t.g.v. verstoppingen
- Geen onnodige katheterwisselingen
- Verhoogt levenskwaliteit van de patiënt
- Röntgencontrastlijn en – tip voor controle onder doorlichting



### Transurethrale uitvoering met Nelatontip

Diam.	Cat.nr.	Max.*	Z-Index nr.
12 Ch.	01/13/12/10	10 ml.	15331199
14 Ch.	01/13/14/10	10 ml.	15331202
16 Ch.	01/13/16/10	10 ml.	15331210
18 Ch.	01/13/18/10	10 ml.	15331229
20 Ch.	01/13/20/10	10 ml.	15331237
22 Ch.	01/13/22/10	10 ml.	15331245

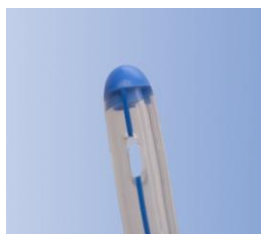

\*Onder normale omstandigheden is een vulling met 5-10 ml. glycerine oplossing voldoende.

### Suprapubische uitvoering met open tip

Diam.	Cat.nr.	Max.**	Z-Index nr.
12 Ch.	02/13/12/10	10 ml.	15341380
14 Ch.	02/13/14/10	10 ml.	15341399
16 Ch.	02/13/16/10	10 ml.	15341402
18 Ch.	02/13/18/10	10 ml.	15341410
20 Ch.	02/13/20/10	10 ml.	15341429
22 Ch.	02/13/22/10	10 ml.	15341437



\*\*Onder normale omstandigheden is een vulling met 5 ml. glycerine oplossing voldoende.

Alle uitvoeringen zijn per stuk en worden standaard geleverd met een 10 ml. Luer spuitje met 10% glycerine in aqua dest. oplossing voor vulling van de ballon. Bijvullen of controle van de inhoud is hierdoor overbodig.