

# URONOVIS Longlife® Siliconen serie


**100% siliconen ballonkatheter met synthetische heparine coating.**

**In transurethrale en suprapubische uitvoering.**

Het unieke van de Longlife® katheter is de coating van synthetische heparine, die covalent aan de binnen- en buitenzijde van de katheter gebonden is. Door de covalente binding diffundeert de coating niet in het rondom gelegen weefsel, en vormt een uiterst krachtig pantser tegen infecties en verstoppingen. Synthetische heparine gaat vorming van een bacteriologische biofilm op en in de katheter tegen, en reduceert zo sterk de kans op infecties en verstoppingen door kristallisatie (incrustatie). Een unieke, en wereldwijd gepatenteerde, technologie van Uronovis GmbH.

## De voordelen in de praktijk zijn:

- Sterke reductie van infectierisico
- Een probleemloze levensduur van 90 dagen of meer
- Het vermijden van blaasspoelingen t.g.v. verstoppingen
- Geen onnodige katheterwisselingen
- Verhoogt levenskwaliteit van de patiënt
- Röntgencontrastlijn en -tip voor controle onder doorlichting

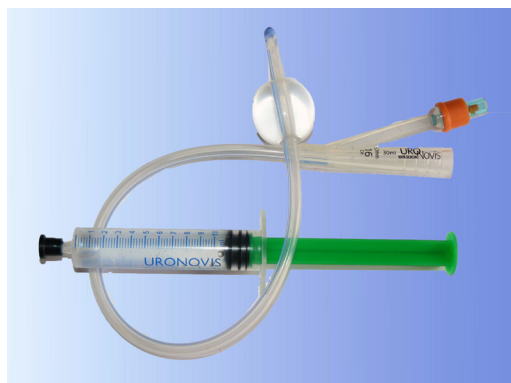

## Advies:

Wij adviseren de ballon uitsluitend te vullen met de meegeleverde 10% glycerineoplossing, om zo het ballonvolume gedurende de gehele verblijfsduur te garanderen.


Cat. nr.	Omschrijving	Verp. stuks	Z-Index nr.
09/10/10/GL	Uronovis 10 ml. luer spuitje met 10% glycerine in aqua dest.		15333981



## Transurethrale uitvoering met Nelatontip

Cat. nr.	Omschrijving	Diam.	Max.	Verp. stuks	Z-Index nr.
01/13/12/10	Uronovis Longlife® TU	12 Ch.	10 ml.	stuks	15331199
01/13/14/10	Uronovis Longlife® TU	14 Ch.	10 ml.	stuks	15331202
01/13/16/30	Uronovis Longlife® TU	16 Ch.	30 ml.	stuks	15331210
01/13/18/30	Uronovis Longlife® TU	18 Ch.	30 ml.	stuks	15331229
01/13/20/30	Uronovis Longlife® TU	20 Ch.	30 ml.	stuks	15331237
01/13/22/30	Uronovis Longlife® TU	22 Ch.	30 ml.	stuks	15331245
01/13/24/30	Uronovis Longlife® TU	24 Ch.	30 ml.	stuks	15331253
01/13/26/30	Uronovis Longlife® TU	26 Ch.	30 ml.	stuks	15331261

Onder normale omstandigheden adviseren wij de ballon van de maten 12 Ch. en 14 Ch. met 5ml., en de grotere Ch. maten te vullen met 10 ml. glycerineoplossing.

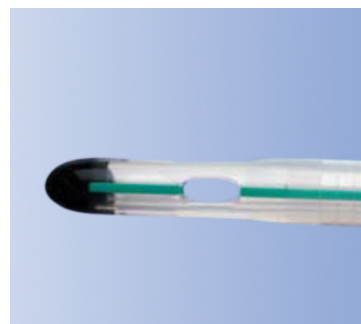

## Suprapubische uitvoering met open tip

Cat. nr.	Omschrijving	Diam.	Max.	Verp. stuks	Z-Index nr.
02/13/12/10	Uronovis Longlife® SP	12 Ch.	10 ml.	stuks	15341380
02/13/14/10	Uronovis Longlife® SP	14 Ch.	10 ml.	stuks	15341399
02/13/16/10	Uronovis Longlife® SP	16 Ch.	10 ml.	stuks	15341402
02/13/18/10	Uronovis Longlife® SP	18 Ch.	10 ml.	stuks	15341410
02/13/20/10	Uronovis Longlife® SP	20 Ch.	10 ml.	stuks	15341429
02/13/22/10	Uronovis Longlife® SP	22 Ch.	10 ml.	stuks	15341437

Onder normale omstandigheden adviseren wij de ballon met niet meer dan 5 ml. glycerineoplossing te vullen.

